




1. Despiece y recambios del elevador.

En el siguiente listado se numeran los principales recambios del elevador. Para el recambio de cualquier otro componente ponerse en contacto con las **oficinas** de METALU.


| | | | |
|----|---------------------------------|----|------------------------------------|
| 4 | Silla | 60 | Actuador |
| 5 | Base de la silla y posapiés | 61 | Pasador del actuador |
| 6 | Reposabrazos | 66 | Caja de control |
| 12 | Ruedas | 67 | Batería |
| 15 | Tacos de anclaje | 68 | Soporte batería y caja de control |
| 35 | Porta - silla | 69 | Mando de funcionamiento o botonera |
| 50 | Cuerpo del elevador | 70 | Cargador batería |
| 59 | Anilla del pasador del actuador | 71 | Funda de batería y caja de control |

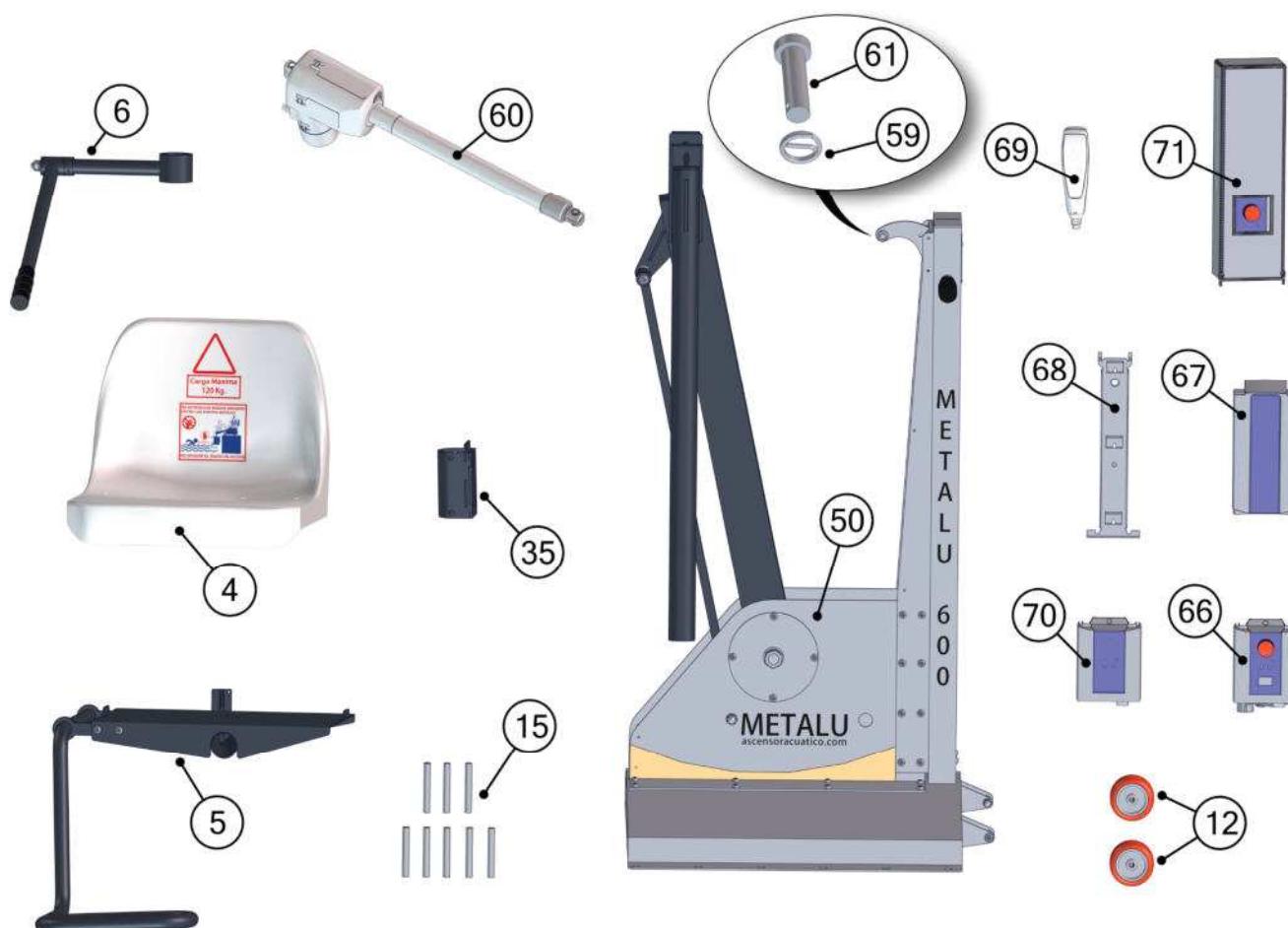

Despiece y recambios del elevador modelo METALU S-600

11. Cotas espaciales del elevador

En la siguiente imagen se pueden observar las cotas del elevador METALU S-600 desde el perfil de una piscina estándar, unidades en milímetros [mm].

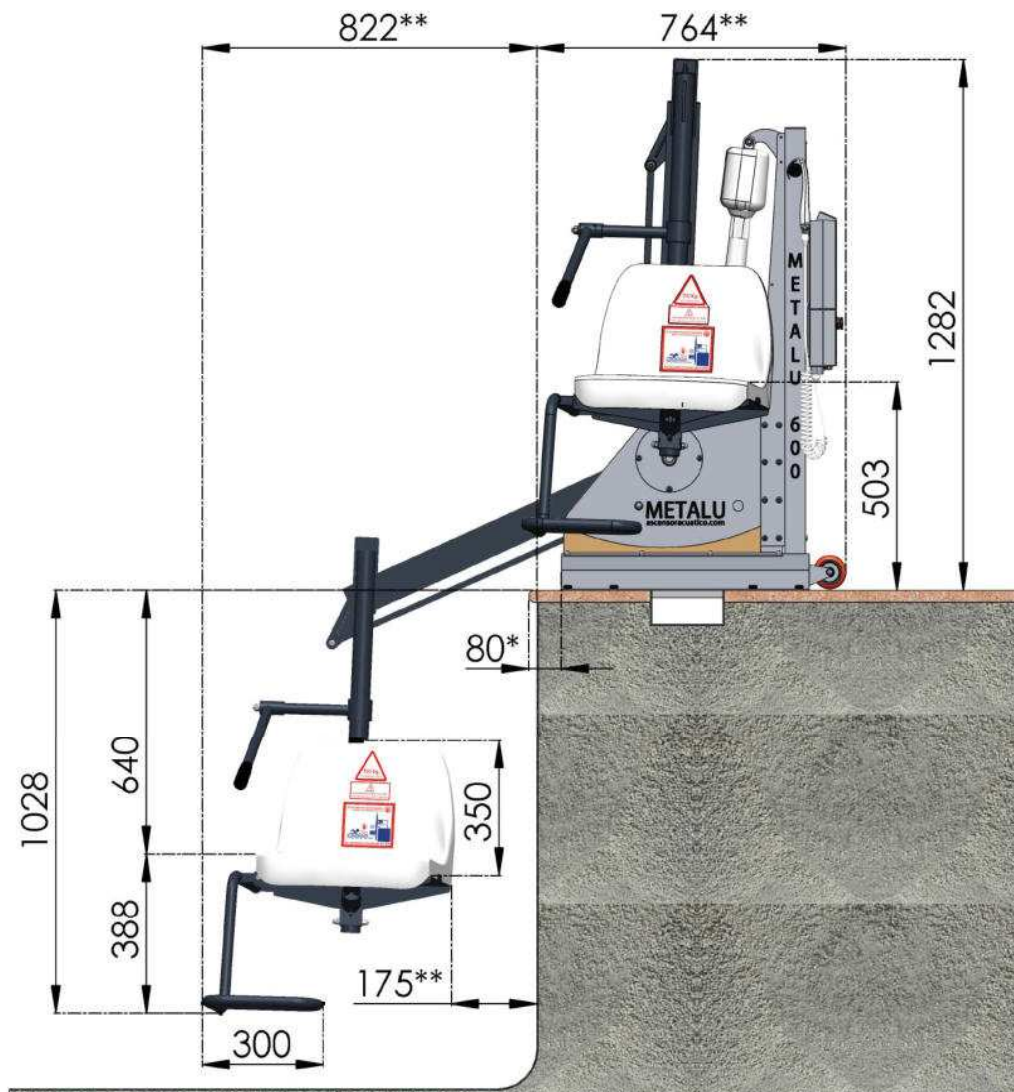


Cotas de una vista lateral del elevador S-600.

* La distancia del elevador al borde de la piscina puede oscilar entre 50 mm y 120 mm, por lo que se ha acotado una distancia media de 80 mm. Las cotas marcadas con ** dependen de este valor.

** Las cotas dependen del valor de la cota de la marca del comentario anterior (cota de 80 mm).

En la siguiente imagen se pueden observar las cotas del elevador METALU S-600 desde una vista en planta para una piscina estándar, unidades en milímetros [mm].

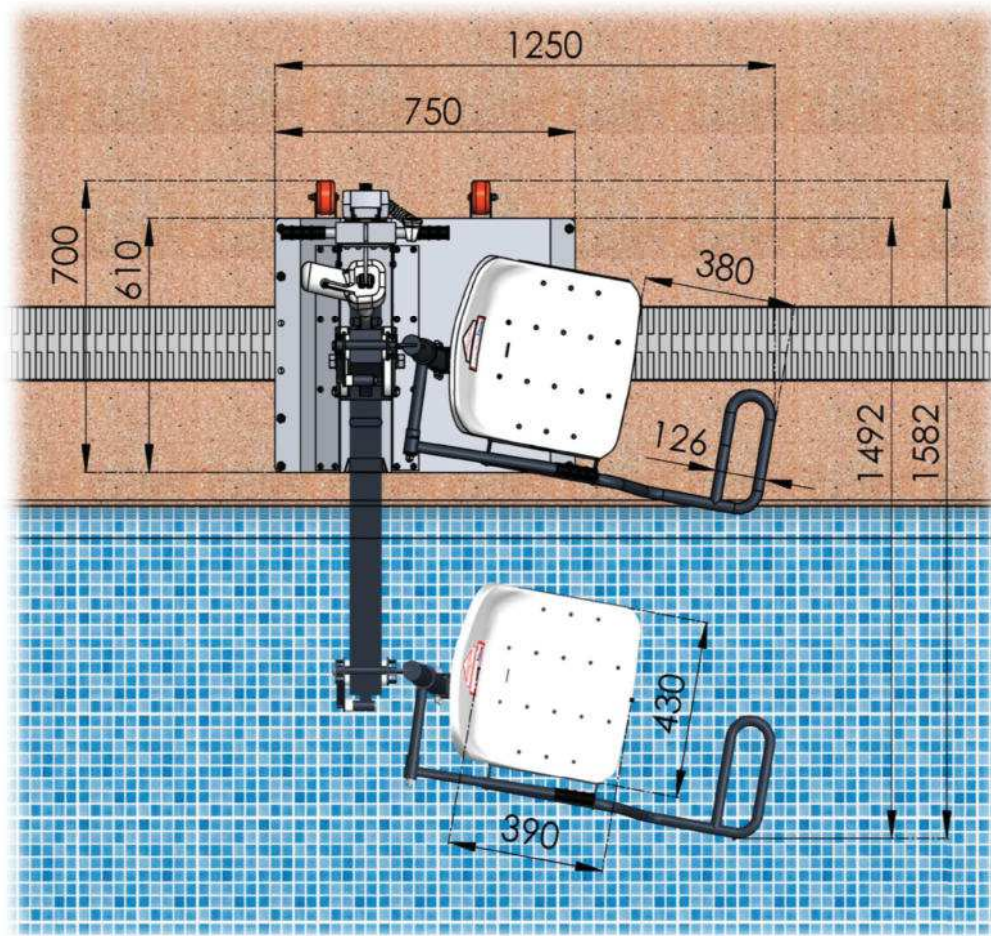


Cotas de una vista en planta del elevador S-600.

El elevador tiene un diseño pensado para el fácil transporte y almacenamiento, por ello la base tiene unas dimensiones de 750 mm para poder pasar por una puerta estándar (quitando fácilmente la silla del elevador).



En el espacio tridimensional las posiciones del elevador son las mostradas en la siguiente imagen.

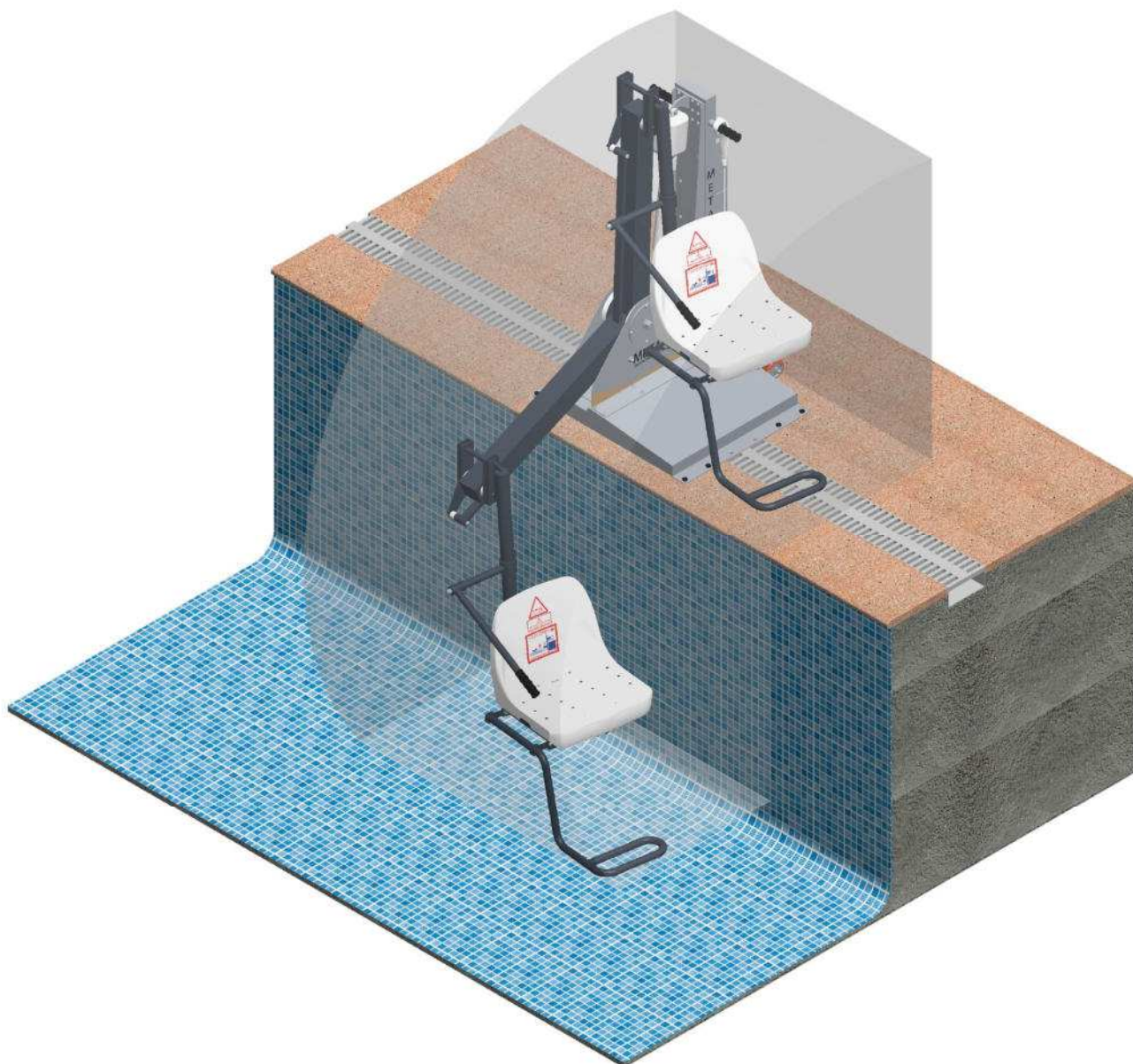

Cotas del espacio tridimensional del elevador S-600.

MANUFACTURAS METÁLICAS LUISIANERAS, S.L.

Ascensor acuático a batería modelo METALU S-600

Manual y certificados

Dirección: Polígono Industrial Los Motillos, C/ Madrid n.º 11 naves A, C, D, G, H, 41430.

Localidad: La Luisiana (Sevilla).

CIF: B – 41834508

Teléfono principal: +34 955 907 784

Página web: www.ascensoracuatico.com

Correo electrónico: info@ascensoracuatico.com

Contactos para consultas técnicas:

- Teléfono: +34 613 165 661
- Correo: soporte1@ascensoracuatico.com



Otra documentación disponible:



Instalación y montaje



Despiece y solución de problemas



Complementos adicionales